




**Prestige Smart System®  
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS  
INSTRUCTIONS FOR USE**

**Intended Use:** The Prestige Smart System® Family of Products (Meters, Test Strips, and Glucose Controls) is intended for both professional and self-testing of glucose in human whole blood. Testing blood glucose regularly can help keep diabetes under control. Diabetes should be managed under the guidance of a Doctor or Diabetes Healthcare Professional.

**Product Description:** The Prestige Smart System® Test Strip is a plastic strip that changes color as it reacts with the glucose in a drop of whole blood or Control solution. The Prestige Smart System® Meter measures the color and displays glucose results.

Important parts of the Test Strip:

1. Test Spot: This "circle" is where blood or Control solution is applied.
2. Color Spot: Color Spot changes color when the Strip reacts with the glucose in blood or Control solution.

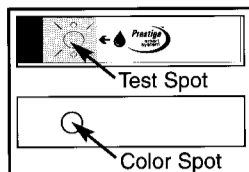

**Precautions:** Use Prestige Smart System® Test Strips for *in vitro* (external) use only. DO NOT CONSUME.

Do not use Color Spot alone (without the Meter) to measure glucose. This is not a visual test.

Before running a test, allow Meter, Test Strips and Control solution to reach room temperature.

**NEVER** transfer Test Strips from one vial to another; store Test Strips ONLY in their original vial. Discard any vials that appear cracked.

**How to Perform a Blood Glucose Test:** Read your Owner's Booklet for complete testing details.


1. **Gather Supplies.** Meter, Test Strips, Lancing Device, Lancet, Facial Tissue
2. **Turn the Meter on.** Match the Code printed on the Test Strip Vial Label with the Code displayed in the Meter. Change Meter Code if needed (see Owner's Booklet).

3. **Remove one Test Strip from the vial.** Replace cap.

4. **Obtain blood.** One drop of fresh capillary whole blood lanced from a clean, dry finger is the preferred sample. See Lancing Device Instructions for Use. Venous whole blood drawn by a Healthcare Professional may also be used to perform a test. Please read "Clinical Testing with the Prestige Smart System" for instructions on blood collection and preparation using venous blood. **NEVER** use serum, plasma or clotted blood.

5. **Apply blood.** Apply blood to the Test Spot of the Test Strip, allowing the Test Spot to absorb the blood. **Do not** allow finger to touch the Test Spot.

6. **Check Color Spot.** After applying blood to the Test Spot, turn the Test Strip over. **Check the Color Spot for full color development throughout the entire Color Spot area.** Prestige Smart System® Test Strips require as little as 4µL of sample to develop the entire Color Spot area. If the entire area does not show full color development (not enough blood) or appears "wet" (too much blood), discard the Test Strip and repeat the test with a new Test Strip.

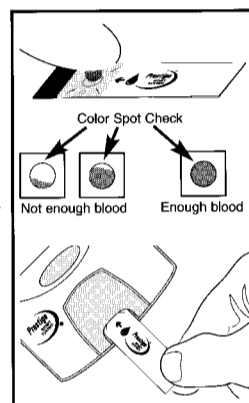

7. **Insert Test Strip.** Turn Test Strip over so Test Spot is facing up. Point arrow printed on Test Strip towards the Meter and insert the Test Strip into the Meter Test Strip Platform.

8. **Record the result in your Self-Test Log Book.**

9. **Turn the Meter off.** Discard Test Strip. Pull the Test Strip from the Meter and discard in appropriate container.

**Expected Results:** Expected whole blood glucose results for people without diabetes.<sup>1</sup>

Time	Result (mg/dL)	Result (mmol/L)
Before Meals	80-120	4.4-6.7
Bedtime Goal	100-140	5.6-7.8

If you are not a known diabetic and your whole blood glucose result remains below 60 mg/dL (3.3 mmol/L) or above 240 mg/dL (13.3 mmol/L)<sup>2</sup>, CONTACT YOUR DOCTOR.

**Unusual Test Results:** You may get a test result that seems too high or too low or does not agree with the way you feel. If this happens, please check your Meter, Test Strips and testing technique. Follow the Troubleshooting Tips below.

1. Repeat the test using a new Test Strip. After applying blood to the Test Spot, turn the Test Strip over. Check the Color Spot for full color development throughout the entire Color Spot area. If the entire area does not show full color development (not enough blood) or appears "wet" (too much blood), discard the Test Strip. Too little or too much blood can give false glucose readings.
2. Check the expiration date on the Test Strip Vial label. If the expiration date has passed, throw the vial away and use a new vial of Test Strips.
3. Check for discoloration of the Color Spot on an unused Test Strip. The Test Strips may be damaged. Damage may occur if the vial was not tightly recapped, or if the Strips were stored in extreme heat or cold. Replace the Strips as needed.
4. Match the Code printed on the Test Strip Vial Label with the Meter Code. Change the Meter Code if needed. Follow the steps described in your Owner's Booklet.
5. Clean the Meter. Read Section 7 of the Owner's Booklet and follow all the steps listed.
6. Perform QC testing (see below).

**If results seem too high or low, repeat the test with a new Test Strip. Always consult with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional before changing your treatment program.**

**Quality Control (QC) Testing (using Control Solution and the Standard Strip)**

QC testing should be performed:

- Before using your Meter for the first time
- When a new vial of Test Strips is opened
- When your results do not agree with the way you feel
- When you suspect a problem with the Meter/System
- When you want to check your testing technique
- After you have removed and replaced the Test Strip Platform (ALWAYS run a Standard Strip test).

**Prestige Smart System®** Control solution is used to check testing technique and System performance. Two levels of Control solution (low and high) are available. When Control results fall within the Control Result Range printed on the Test Strip Vial Label in use, the System is working as it should, and your testing technique is good. The Control Result Range can be found on the Test Strip box and on the Test Strip vial label. ①-indicates low result range ②-indicates high result range. Read the Owner's Booklet or Glucose Control Instructions for Use for complete testing details.

The **Prestige Smart System®** Standard Strip is a hard plastic strip supplied with each Meter. The Standard Strip does not have a lot number or an expiration date. When Standard Strip results fall within the range of numbers printed on the Standard Strip label, the Meter is working as it should. Read the Owner's Booklet for complete testing details.

**Storing Test Strips:** Test Strips must be kept in their original, capped, labeled vial. Contact with moisture may cause false results. After removing a Test Strip from the vial, immediately recap the vial.

Store Test Strips in a dry place at room temperature below 86°F/30°C. **DO NOT REFRIGERATE OR FREEZE.**

**IMPORTANT:** ALWAYS bring Test Strip vial to room temperature before opening and using Test Strips.

**Storing Test Strips (continued):** DO NOT store in a bathroom or kitchen. DO NOT expose Test Strips to extreme heat or cold, direct sunlight, or humidity.

**Limitations:** The Prestige Smart System® should not be used to test newborn (neonatal) blood samples.

The following **WILL** affect results:

1. Blood preserved with fluoride anticoagulant<sup>3</sup>
2. Medications containing L-dopa<sup>3</sup>

The following **MAY** affect results:

1. Hyperglycemia with hyperosmolarity, with or without ketosis.
2. Thickened blood caused by dehydration

**NOTE:** Similar observations have been reported by other blood glucose testing systems.<sup>4,5</sup>

The following **WILL NOT** affect results:

1. Hematocrit levels between 30 and 55 percent<sup>3</sup>
2. Elevated total blood cholesterol and triglycerides<sup>3</sup>
3. Reducing substances such as uric and ascorbic acid when occurring in expected blood concentrations<sup>4</sup>
4. Treatment of blood with EDTA or Heparin<sup>3</sup>
5. Acetaminophen, salicylate, ibuprofen and ketoprofen occurring in expected blood concentrations<sup>4</sup>
6. Testing at altitudes up to and including 7,000 feet<sup>3</sup>

**Test Principle:** The Prestige Smart System® measures whole blood glucose by using membrane technology that employs the glucose oxidase/peroxidase reaction.

When whole blood is applied to a Test Strip, the glucose in the plasma (liquid part of the blood) is absorbed into the Color Spot and reacts with chemicals that break down the glucose. The amount of glucose in the blood changes the color of the Color Spot. The Meter reads the color and displays the glucose value.

**Chemical Composition:**

<b>Enzymes:</b>	Glucose Oxidase: ( <i>Aspergillus niger</i> )	≥ 8 units
	Peroxidase: (horseradish)	≥ 8 units
<b>Color Indicators:</b>	4-Aminoantipyrine:	≥ 51µg
	N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfolpropyl)-3, 5 dimethoxyaniline:	≥ 66µg
<b>Nonreactive Ingredients:</b>	Buffer and Stabilizers:	≥ 770 µg

**Clinical Testing with the Prestige Smart System® (For Healthcare Professionals Only):**

The Prestige Smart System® is optimized for testing with fresh capillary whole blood. When results obtained from the Prestige Smart System® are compared to results performed with a lab system, it is advised to use fresh blood from a clean, dry finger for both the Prestige Smart System® and lab System. For best results, glucose tests should be performed within ten minutes after sampling from the finger because blood glucose levels decrease over time.

If venous blood is used, it is advised that samples be drawn into tubes that contain either EDTA (purple top tube) or Heparin (green top tube). Each tube of whole blood should be mixed gently just prior to testing. DO NOT USE BLOOD SAMPLES THAT HAVE BEEN PRESERVED WITH FLUORIDE. DO NOT USE PLASMA, SERUM OR CLOTED BLOOD. Avoid testing samples that were drawn more than ten minutes prior to testing. Always run Prestige Smart System® blood glucose tests and lab tests at the same time.

**NOTE:** Even when tests are performed within ten minutes after sampling and per manufacturers' instructions, there may be a large difference between capillary whole blood results tested using the Prestige Smart System® and venous whole blood tested using a lab system.<sup>6,7</sup>

**Performance Characteristics:**

**ACCURACY:** Whole blood glucose test results were compared using the Prestige System and the Yellow Springs Instrument Model 23A, which also uses a glucose oxidase method. The study shows that the Prestige Smart System® compares well with a laboratory system. A regression analysis of the 200 tests performed is given below:

$$r = 0.995$$

$$\text{Slope} = 1.007$$

$$Y\text{-intercept} = -0.24$$

**PRECISION:** A whole blood precision study was performed in a lab using the Prestige Smart System®. This study shows a Strip-to-Strip variation of less than or equal to 5.2%.

Results are shown below:

No. of Samples	=	20.0	20.0	20.0	20.0
Average (mg/dL)	=	48.0	107.0	242.0	515.0
SD	=	2.4	4.3	12.7	24.6
C.V (%)	=	5.1	4.1	5.2	4.8

**CONSUMER STUDY:** The Prestige Smart System® was tested at a diabetes clinic of a large urban area hospital and a diabetes care center of a medical center. Prestige results were obtained from 106 patients and were compared to parallel results obtained on Yellow Springs Instruments Model 23A7 or Model 1500®. This study shows that patients, when self-testing, are able to obtain accurate results when compared to professional test results using a lab System.

**OUR COMMITMENT TO YOU:** Our goal is to provide you with quality healthcare products and dedicated customer service. If you have any questions about the use of any Prestige Smart System® product, please give us a call: 1-800-803-6025 or visit our website at [www.homediagnosics.com](http://www.homediagnosics.com), for answers to frequently asked questions.

If you need medical assistance, please contact your Doctor or Diabetes Healthcare Professional.

**References:**

1. American Diabetes Association Clinical Practice Recommendation, Diabetes Care, 23 (Suppl. 1): 532-560, 2000.
2. Beaser, R.S., Hill, J.V.C.: The Joslin Guide to Diabetes, New York, NY: FIRESIDE (1995). 148 - 161.
3. Data on file.
4. Hackett J. Aziz, K., "Review Criteria Assessment of Portable Blood Glucose Monitoring in Vitro Diagnostic Devices Using Glucose Oxidase, Dehydrogenase or Hexokinase Methodology," FDA Draft Document, p.6. (1997).
5. Young D.S.: Effects on Drugs of Clinical Laboratory Test, Third Edition. Washington, D.C.:AACC Press (1990), pp.3-168, 3-180.
6. Caraway, W.I "Carbohydrates" in Fundamentals of Clinical Chemistry, Tietz NW, ED., Philadelphia, PA, Saunders, 1976. pp 242-243.
7. Yellow Springs Instrument Model 23A and 23AM Glucose Analyzer Instruction Manual, "Principles of Operation", pp. 1-2 and "Performance Specifications", p.3, 1986.
8. YSI 1500 Sidekick Glucose Operations Manual, "Principles of Operation", pp. 4-1-4-3, "Specifications", pp.1-2.

**Prestige Smart System®** is a registered trademark of Home Diagnostics, Inc. Patent No. 5,296,192 • 6,040,195 • 6,284,550

**SYMBOLS:**

Sterile	① Low Control Test result range	② High Control Test result range	SN Serial number	② Single Use Only	Number of Tests
Use By date	For assistance call	Attention! Read Instructions for Use.	Storage temperature range	Authorized Representative	
Lot number	For <i>in vitro</i> diagnostic testing only	Code number	Manufactured by		



Prestige Smart System®

TIRAS DE PRUEBA DE GLUCOSA EN SANGRE

INSTRUCCIONES

Uso: La familia de productos Prestige Smart System® (Glucómetros, Tiras de Prueba, y Controles de Glucosa) están destinados tanto para mediciones profesionales como para automediciones del nivel de glucosa en la sangre humana total.

Descripción del Producto: La Tira de Prueba Prestige Smart System® es una tira plástica que cambia de color al reaccionar con la glucosa contenida en una gota de sangre total o de solución de Control.

- 1. Punto de Prueba: Este "círculo" es donde se aplica la sangre o la solución de Control.
2. Punto de Color: El Punto de Color cambia de color cuando la Tira reacciona con la glucosa contenida en la sangre o con la solución de Control.



Precauciones: Use las Tiras de Prueba Prestige Smart System® sólo para diagnósticos in vitro (externos). NO LAS INGIERA.

No use exclusivamente el Punto de Color (sin el Glucómetro) para medir la glucosa. Esta no es una prueba visual.

Antes de iniciar una prueba, deje que el Glucómetro, las Tiras de Prueba y la solución de Control alcancen la temperatura ambiente.


NUNCA transfiera las Tiras de Prueba de un frasco a otro; guarde las Tiras de Prueba SOLAMENTE en su frasco original. Deseche cualquier frasco que parezca estar rajado.

Cómo realizar una prueba de Glucosa en Sangre: Lea el Manual del Propietario para obtener información completa sobre la prueba.

- 1. Reúna los suministros. Glucómetro, Tiras de Prueba, Dispositivo de Punción, Lanceta, Servilleta Facial.
2. Encienda el glucómetro. Haga coincidir el Código impreso en la Etiqueta del Frasco de Tiras de Prueba con el Código que aparece en el Glucómetro.
3. Retire una Tira de Prueba del frasco. Coloque la tapa nuevamente.
4. Obtenga la sangre. La muestra preferida es una gota de sangre total capilar fresca extraída de un dedo limpio y seco.

5. Aplique la sangre. Aplique sangre al Punto de Prueba de la Tira de Prueba, y deje que el Punto de Prueba absorba la sangre. No permita que el dedo toque el Punto de Prueba.

6. Verifique el Punto de Control. Después de aplicar la sangre al Punto de Prueba, voltee la Tira de Prueba. Examine el Punto de Color para asegurarse de que haya un color definido en toda el área. Las Tiras de Prueba Prestige Smart System® sólo requieren una muestra de 4µL para definir el color de toda el área del Punto de Color.

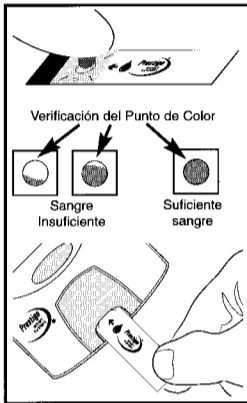

- 7. Inserte la Tira de Prueba. Voltee la Tira de Prueba de manera que el Punto de Prueba quede hacia arriba. Inserte la Tira de Prueba en la Plataforma de la Tira de Prueba en el Glucómetro en el sentido de la flecha.
8. Registre el resultado en el Cuaderno de Autopruebas.
9. Apague el glucómetro. Deseche la Tira de Prueba. Saque la Tira de Prueba del Glucómetro y deséchela en un recipiente apropiado.

Resultados esperados: Resultados de glucosa en sangre esperados para personas sin diabetes.

Table with 3 columns: Hora, Resultado (mg/dL), Resultado (mmol/L). Rows for 'Antes de las comidas' and 'Antes de acostarse'.

Si usted no es diabético, pero sus resultados de glucosa en sangre total permanecen por debajo de 60 mg/dL (3.3 mmol/L) o sobre 240 mg/dL (13.3 mmol/L), COMUNIQUESE CON SU MÉDICO.

Resultados inusuales: Usted puede obtener un resultado que parezca ser demasiado alto o bajo, o que no concuerde con la forma en que se siente. Si esto sucede, verifique su Glucómetro, las Tiras de Prueba y su técnica de prueba.

- 1. Repita la prueba usando una nueva Tira de Prueba. Después de aplicar sangre al Punto de Prueba, voltee la Tira de Prueba. Examine el Punto de Color para asegurarse de que haya un color definido en toda el área.
2. Verifique la fecha de vencimiento en la etiqueta del Frasco de Tiras de Prueba. Si ha pasado la fecha de vencimiento, deseche el frasco y use un nuevo frasco de Tiras de Prueba.
3. Compruebe que no haya decoloración en el Punto de Color de una Tira de Prueba no usada.
4. Haga coincidir el Código impreso en la Etiqueta del Frasco de Tiras de Prueba con el Código que aparece en el Glucómetro.
5. Limpie el Glucómetro. Lea la Sección 7 del Manual del Propietario y siga los pasos enumerados.
6. Haga una prueba de Control de Calidad (QC) (a continuación).

Si los resultados parecen ser demasiado altos o bajos, repita la prueba con una Tira de Prueba nueva. Consulte siempre a su Médico o Profesional de la Salud antes de cambiar su programa de tratamiento.

Prueba QC (usando Solución de Control y la Tira Estándar)

La prueba QC debe realizarse:

- Antes de usar el Glucómetro por primera vez
• Al abrir un nuevo frasco de Tiras de Prueba
• Cuando sus resultados no coincidan con la forma en que se siente
• Cuando sospeche que hay un problema con el Glucómetro/Sistema
• Cuando desee comprobar su técnica de prueba
• Después de haber retirado y reemplazado la Plataforma de Tiras de Prueba (Realice SIEMPRE una prueba de Tira Estándar).

La solución de Control Prestige Smart System® se utiliza para comprobar la técnica de pruebas y el desempeño del Sistema. Existen dos niveles de solución de Control (alto y bajo). Cuando los resultados del Control caen dentro del resultado del Rango de Control impreso en la Etiqueta del Frasco de Tiras de Prueba en uso, el Sistema funciona correctamente, y su técnica de pruebas es adecuada.

Almacenamiento de las Tiras de Prueba: Las Tiras de Prueba deben guardarse en su frasco original, tapado y etiquetado. El contacto de estas con la humedad puede dar lugar a resultados falsos. Después de retirar del frasco una Tira de Prueba, ciérrelo inmediatamente.

Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco por debajo de 30C/86°F. NO LO REFRIGERAR O CONGELAR.

IMPORTANTE: Antes de abrir y usar las Tiras de Prueba, SIEMPRE deje que el frasco de Tiras de Prueba adquiera la temperatura ambiente.

Almacenamiento de las Tiras de Prueba (continuación): NO las guarde en el baño ni en la cocina. NO las exponga a calor o frío extremo, a los rayos del sol ni a la humedad.

Limitaciones: Prestige Smart System® no debe usarse con muestras de sangre de recién nacido.

Lo siguiente AFECTARÁ los resultados:

- 1. Sangre conservada con anticoagulante de fluoruro³
2. Medicamentos que contengan L-dopa³

Lo siguiente PODRÍA afectar los resultados:

- 1. Hiperglicemia con hiperosmolaridad, con o sin cetosis
2. Sangre espesa debido a deshidratación

NOTA: Con otros sistemas de medición de glucosa en sangre se han reportado observaciones similares.4,5

Lo siguiente NO AFECTARÁ los resultados:

- 1. Niveles de hematocritos entre 30 y 55 por ciento³
2. Alto nivel total de colesterol y triglicéridos en sangre³
3. Sustancias reductoras, tales como ácido úrico y ácido ascórbico, cuando se presentan en concentraciones esperadas en sangre⁴
4. Tratamiento de la sangre con EDTA o Heparina⁴
5. Acetaminofeno, salicilato, ibuprofeno y cetoprofeno, cuando se presentan en concentraciones esperadas en sangre⁴
6. Pruebas realizadas a alturas de hasta 2,000 m, inclusive³

Principio de la prueba: Prestige Smart System® mide la glucosa en sangre total mediante una tecnología de membrana que emplea la reacción glucosa oxidasa/peroxidasa.

Cuando se aplica sangre total al Punto de Prueba de una Tira de Prueba, la glucosa contenida en el plasma (la parte líquida de la sangre) es absorbida por el Punto de Color, y reacciona con los agentes químicos que descomponen la glucosa. La cantidad de glucosa contenida en la sangre cambia el color del Punto de Color. El Glucómetro lee el color e indica el valor de glucosa

Composición química:

Table with 2 columns: Componente and Cantidad. Rows for Enzimas (Glucosa oxidasa, Peroxidasa), Indicadores de color (4-Aminoantipirina, N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3, 5 dimetoxianilina), and Ingredientes no reactivos (Tampones y Estabilizadores).

Pruebas clínicas con Prestige Smart System® (sólo para Profesionales de la Salud): El Sistema Prestige Smart System® es óptimo para analizar sangre total capilar fresca. Al comparar las pruebas de glucosa en sangre total realizadas por el Sistema Prestige Smart System® con las de un laboratorio, se recomienda usar sangre fresca de un dedo limpio y seco, tanto para el Prestige Smart System® como para el sistema de laboratorio.

Si se utiliza sangre venosa, se recomienda que las muestras se coloquen en tubos que contengan EDTA (tubo de boca púrpura) o Heparina (tubo de boca verde). Cada tubo de sangre total deberá agitarse suavemente antes de la prueba. NO USE MUESTRAS DE SANGRE QUE SE HAYAN CONSERVADO CON FLUORURO. NO USE PLASMA, SUERO NI SANGRE COAGULADA.

NOTA: Aunque las pruebas se realicen en un plazo de 10 minutos después del muestreo, y según las instrucciones del fabricante, puede haber una diferencia notable entre los resultados de la sangre total capilar analizada con el Prestige Smart System® y la sangre total venosa analizada con el sistema de laboratorio.6,7

Características de desempeño:4

EXACTITUD: Se compararon los resultados de pruebas de glucosa en sangre obtenidos con el Sistema Prestige y con el Instrumento Yellow Springs, Modelo 23A, que también utiliza un método de glucosa oxidasa. El estudio muestra que el desempeño del Prestige Smart System® es comparable con el de un sistema de laboratorio. A continuación se muestra un análisis de regresión de las 200 pruebas realizadas:

r = 0.995
Inclin. = 1.007
Intersec. en Y = -0.24

PRECISIÓN: Se realizó un estudio de precisión con sangre total en un laboratorio, utilizando el Prestige Smart System®. Este estudio muestra una variación entre Tiras menor que o igual al 5.2%. Los resultados se muestran a continuación:

Table with 4 columns: No. de muestras, Medio (mg/dL), Desv. est., C.V (%). Rows for 20.0, 48.0, 2.4, 5.1 and 20.0, 107.0, 4.3, 4.1.

ESTUDIO DEL CONSUMIDOR: El Prestige Smart System® fue ensayado en una clínica para diabéticos de un gran hospital urbano y en un centro de atención a la diabetes de un centro médico. Los resultados correspondientes al Sistema Prestige se obtuvieron de 106 pacientes, y se compararon con resultados paralelos obtenidos mediante Instrumentos Yellow Springs, Modelo 23A7 o Modelo 1500®. Este estudio muestra que los pacientes, al efectuar sus automediciones, pueden obtener resultados exactos, cuando éstos se comparan con los de pruebas profesionales realizadas con un sistema de laboratorio.

NUESTRO COMPROMISO CON USTED: Nuestro objetivo es proporcionarle productos de calidad para el cuidado de la salud y un excelente servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de cualquier producto Prestige Smart System®, llame al 1-800-803-6025, o visite nuestro sitio Web en www.homediagnostics.com, donde hallará las respuestas a preguntas frecuentes.

Si necesita asistencia médica, llame a su Médico o Profesional de Salud especializado en Diabetes.

Referencias:

- 1. American Diabetes Association Clinical Practice Recommendation, Diabetes Care, 23 (Suppl. 1): 532-560, 2000.
2. Beaser, R.S., Hill, J.V.C.: The Joslin Guide to Diabetes, New York, NY: FIELDSIDE (1995). 148 - 161.
3. Datos en archivo.
4. Hacket J. Aziz, K., "Review Criteria Assessment of Portable Blood Glucose Monitoring in Vitro Diagnostic Devices Using Glucose Oxidase, Dehydrogenase or Hexokinase Methodology," FDA Draft Document, p.6. (1997).
5. Young D.S.: Effects on Drugs of Clinical Laboratory Test, Third Edition. Washington, D.C.:AACC Press (1990), pp.3-168, 3-180.
6. Caraway, WI "Carbohydrates" in Fundamentals of Clinical Chemistry, Tietz NW, ED., Philadelphia, PA, Saunders, 1976. pp 242-243.
7. Yellow Springs Instrument Model 23A and 23AM Glucose Analyzer Instruction Manual, "Principles of Operation", pp. 1-2 and "Performance Specifications", p.3, 1986.
8. YSI 1500 Sidekick Glucose Operations Manual, "Principles of Operation", pp. 4-1-4-3, "Specifications", pp.1-2.

Prestige Smart System® es una marca registrada de Home Diagnostics, Inc. Patente No. 5,296,192 • 6,040,195 • 6,284,550

Summary box containing symbols for Sterile, Range, SN, Lot, IVD, Code, and other product information.